

PROTAC[®]
INTEGRATING SENSES

CATÀLEG

Distribuit per:



handycat



CONTINGUTS

Els efectes de les boles	4
Protac Ball Blanket	6
Protac Ball Blanket, novetats	7
Protac Ball Blanket, testimonis	8
Article d'investigació	9
Protac SenSit, Puf i Mòdul de Peus, testimonis	10
Protac SenSit, Puf i Mòdul de Peus	11
Protac MyFit, cases	12
Protac MyFit	13
Protac Ball Cushion, testimonis	14
Protac Ball Cushion	15
Protac GroundMe, testimonis	16
Protac GroundMe	17
Nou Protac KneedMe, testimonis	18
Nou Protac KneedMe	19
Protac MyBaSe, cases	20
Protac MyBaSe	21
Protac A/S	22
Pregunta'ns	23

Els productes Protac són adequats a persones que presenten o pateixen:

Abusos

TDAH

Anorèxia

Ansietat

Apoplexia

Autisme

Dany cerebral

Paràlisi cerebral

Dolor crònic

Sordera i/o ceguera

Demència

Depressió

Trastorns del desenvolupament

Corea de Huntington

Hipermobilitat

Esclerosi múltiple

Trastorns neurològics

Malaltia de Parkinson

Trastorns psiquiàtrics

Alteracions sensorials

Trastorn de processament sensorial

Trastorns de la son

Estrès

Síndrome de Tourette



Els efectes de les boles

Tots els productes Protac contenen boles que, gràcies a la profunda pressió que apliquen i al contacte constant amb la superfície corporal, activen el sentit del tacte, a més de permetre el control postural i el moviment.

Es diu sobre els nostres sentits -el tacte, la vista, l'olfacte, el gust i l'oïda- que, si el nostre cos i ment funcionen correctament, en tenim el control total sobre ells. Però se'ns escapa que els éssers humans estem dotats amb més de cinc sentits.

El nostre sentit més important és el tacte. Permet a la nostra pell percebre qualsevol tipus de contacte i enviar aquest estímul al cervell, informant dels nostres límits corporals. La pell serveix de frontera que ens permet conèixer "què sóc jo" i "què està fora de mi". D'aquesta manera podem percebre la forma del nostre cos i estar alerta del que hi passa.

El canvi de pressió millora la consciència corporal

Quan el contacte és llarg i durador el nostre cervell tendeix a habituar-se a l'estímul i pràcticament deixem de notar la sensació sensorial causada, perdent efectivitat. Per mantenir el sentit actiu és necessari que la pressió

variï. Així actuen les boles dels productes Protac, distribuint una lleugera pressió a molts punts del cos, ajudant al cervell a identificar tots els nostres límits corporals, proporcionant-nos una excel·lent sensació de benestar i impedit que ens acostumem a aquest estímul, ja que les boles varien la seva posició amb qualsevol moviment, mantenint la nostra pell contínuament estimulada.

La simple estimulació de la pell pot mantenir el nostre cervell alerta. Emperò, si existeix algun problema al canal de transmissió dels nostres estímuls o en la manera com els processem, qualsevol contacte amb la pell podria esdevenir molest i estressant. Per mirar de superar aquesta circumstància, la distribució homogènia del pes i les pressions que exerceixen les boles de Protac proporciona al nostre cos una sensació calmant, ajudant al nostre cervell a tenir consciència dels límits corporals.

Moviment calmant

Un altre sentit important és el que ens informa de la posició del nostre cos i el seu moviment, conegut com a sentit propioceptiu. Està format per nombrosos receptors a les articulacions i músculs que envien missatges al cervell i "tranquil·litzen" el sistema nerviós.

De forma intuïtiva i constant utilitzem el moviment per relaxar-nos. Per això, moltes vegades quan estem estressats ens sentim millor si fem una passejada. O, si estem impacients, aprofitem el balanceig d'una cadira o movem rítmicament els peus. Són exemples evidents de com utilitzem sovint el moviment per calmar-nos. En el mateix sentit, quan el pes de les boles dels productes Protac pressionen músculs i articulacions, el cervell processa aquesta pressió com si fos moviment i proporciona una sensació de calma i benestar.

Protac Ball Blanket™

– recurs eficaç d'estimulació sensorial

Calma, sensació de seguretat i millor qualitat del son

Protac Ball Blanket és reconeguda com una ajuda per alleujar els trastorns del son i la hiperactivitat mental i motora a nens, adults i persones grans. Ha estat dissenyada sobre la base dels principis de la teràpia ocupacional respecte al processament sensorial i ha estat provada científicament.

És un bon remei a problemes del son de diversa consideració. Ball Blanket pot utilitzar-se com un edredó ordinari a la nit o durant el dia quan apareix la necessitat de calmar el cos i la ment. La hiperactivitat mental i motora dificulta la relaxació i afecta la manera com percebem el nostre cos. Mitjançant la pressió de les boles es millora la consciència corporal i es provoca una sensació de calma i seguretat que ens assegurarà un millor son i, mercès a aquesta millora, més energia durant el dia.

Trastorns del son

Actualment, Protac Ball Blanket és utilitzada per moltes persones que pateixen trastorns del son o fatiga crònica, a causa del seu efecte beneficiós sobre aquest tipus de patologies derivades de les preocupacions del dia a dia, de l'estrès, del dolor, de l'ansietat, de disfuncions sensorials, de trastorns del desenvolupament o de trastorns mentals o neurològics.

Un trastorn del son desemboca ràpidament en inquietud, irritació, hiperactivitat, problemes de concentració i disminueix la capacitat d'aprenentatge. A més, l'insomni crònic també pot provocar depressió, ansietat i debilitat del sistema immunològic.

Teràpia i activitat

Els terapeutes i altres professionals utilitzen Protac Ball Blanket com un instrument d'estimulació sensorial als espais d'estimulació multisensorial o sales Snoezelen i, per descomptat, també a les sales de tractament convencional.

Disseny, mesures i pes

Protac Ball Blanket està confeccionada amb cotó o amb material ignífug Trevira CS amb certificació OEKO-TEX Estàndard 100, classe I.

Es divideix en diversos compartiments farcits de boles de plàstic, granulat i/o perles de poliestirè segons la seva elecció, i està disponible en quatre versions segons l'edat de l'usuari -per als bebès, nens, adolescents i adults- amb la corresponent funda. Les mesures correctes dependran de l'edat i la talla de l'usuari.

El pes i el farciment s'elegiran segons les necessitats de l'usuari a fi d'obtenir una estimulació sensorial eficient.



Danish Design

Protac Ball Blanket™

Millora la propiocepció

Augmenta la consciència corporal

Calma

Millora la qualitat del son

Revitalitza





Protac Ball Blanket™

– ara en tres versions: Classic, Flexible i Calm

Protac Ball Blanket™ Classic

La Classic és la nostra Ball Blanket més coneguda, la més desenvolupada i la que ha gaudit de més innovacions. L'última novetat que hem incorporat és una manta especial per a la demència i el dolor que conté un farciment de faves (granulat) distribuït en 40 compartiments, per adaptar-se completament al contorn del cos. A més, es pot dividir en dues meitats per encabir en una rentadora convencional sense cap impediment.



Protac Ball Blanket™ Flexible

La sèrie Flexible és similar a la Classic, però amb una nova característica: s'hi poden treure i afegir a conveniència bosses de boles als compartiments de la manta. D'aquesta manera es pot personalitzar completament segons les necessitats de cada usuari. Tant la funda com les bosses de boles es poden rentar en una rentadora domèstica.



Protac Ball Blanket™ Calm

La nova sèrie Calm està formada per mantes calmants amb menys moviment. Estan cosides en canals, formant llargues fileres de boles i proporcionen un altre tipus d'estimulació sensorial en comparació amb les altres mantes. Quan s'enrotlla, forma un sac compacte molt fàcil de transportar. La manta d'adults es pot dividir en dues parts per fer-les cabre sense impediments dins de la rentadora.



Característiques de les noves Protac Ball Blanket:

- Noves boles de plàstic especialment dissenyades per reduir el soroll al mínim
- Les noves mantes es poden rentar a les rentadores domèstiques
- Més flexibilitat en benefici dels seus usuaris

TESTIMONIS

Protac Ball Blanket™

TDAH

Nena de 10 anys amb trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i un trastorn de processament sensorial. Es tracta d'una persona extremadament activa. Patix hipersensibilitat tàctil, li resulta molt incòmode vestir-se i portar qualsevol tipus de roba. També la molesta molt estar en contacte físic amb altres persones i dorm molt malament a les nits. Es va decidir proporcionar-li una manta de boles i se li va recomanar que es tapés amb ella quan sentís la necessitat de calmar-se. Al dormir amb la manta, ràpidament el seu son es va fer més profund i continuat. Ara, durant el dia es troba amb més vitalitat. Gràcies a la manta, la seva hipersensibilitat ha disminuït i ara és capaç de portar jerseis de màniga llarga sense sentir-se incòmoda.

Autisme

Dona amb trastorn autista i discapacitat intel·lectual que presenta una conducta molt disruptiva. A part de molts problemes per dormir, el personal de la seva residència necessita "embolicar-la" amb la seva manta totes les nits i romandre al seu costat agafant-li la mà perquè pugui adormir-se. Tot i així es desperta contínuament. Aquesta situació canvia quan se li ofereix Protac Ball Blanket per primer cop: ara li encanta anar sola al llit i a més presenta una conducta molt més tranquil·la i pacífica.

Demència

Home gran amb demència. Durant el darrer any la seva ansietat ha augmentat exponencialment i el seu comportament és cada cop més agressiu. Es resisteix a que el banyin. El personal ha d'emprar una força notable per ajudar-lo a realitzar la seva higiene personal. Se li va proporcionar Protac Ball Blanket que acceptà immediatament. S'enfada quan la infermera li canvia Ball Blanket per un edredó normal a primera hora del matí, per la qual cosa se li ha permès dormir amb la manta de boles durant tota la nit. Dues o tres setmanes més tard, el personal del centre comenta que s'ha transformat en una persona totalment diferent, les transferències en el bany ja no són font de comportaments agressius i fins i tot canta o mira d'enraonar mentre li fan la higiene personal. A més, s'ha reportat que dos mesos després es va aixecar de la cadira de rodes i va intentar caminar, cosa que no feia des de molt temps enrere.

Trastorns neurològics

Jove amb dany cerebral a causa d'un accident de tràfic. Molt inquiet i amb molt poca consciència corporal. Protac Ball Blanket l'ajuda a calmar-se i a dormir una mica per reposar energia suficient i fer front a la seva rehabilitació diària.

Trastorns mentals

Declaració del portaveu d'un centre psiquiàtric: "Protac Ball Blanket s'usa diàriament en el nostre centre, ajuda als pacients a sentir els seus límits corporals, presenten

"Totalment recomanada. Es podria dir que és com quan els teus pares t'abraçaven de petit. Permet aturar-se un temps per pensar i relaxar-se, però per sobre de tot permet sentir tot el teu cos, sentir-se un mateix."

molta menys ansietat i menys agressivitat, també els aporta una sensació de seguretat genial. A més, l'ús de la manta de boles ha significat un descens del consum de sedants i relaxants musculars. Creiem que Protac Ball Blanket preveu i limita l'agressivitat i el comportament disruptiu. Molts pacients ja ens demanen de forma autònoma la manta de boles quan la necessiten, són conscients del benestar que els aporta".

Dolor

"Em van diagnosticar fibromialgia i immediatament vaig demanar que em deixessin una manta de boles de l'hospital. La utilitzo quan sento que el meu cos està a punt de trencar-se de dolor. Em dóna la sensació que m'ajuda a mantenir unides totes les parts del meu cos. A més, com manté els meus músculs calents, m'aporta una sensació de relax molt agradable. També la utilitzo estirada a terra com una catifa i a la butaca per llegir... ¡ m'encanta embolicar-me amb ella mentre llegeixo un bon llibre!"

Trastorn del desenvolupament

Dona amb trastorn del desenvolupament i gran dificultat de parla, utilitza la llengua de signes per comunicar-se. El seu

estat mental varia contínuament. En els pitjors dies es comporta de manera molt agressiva amb el personal i amb els seus companys de residència quan no l'entenen o no estan gaire per ella. Li resulta molt difícil relaxar-se després d'un brot violent si no se li proporcionen forts sedants. La van introduir en l'ús de Protac Ball Blanket mitjançant diferents jocs en el seu llit, ja que és el seu lloc preferit. Mercès a això, ara molts cops no fa falta que prengui fàrmacs perquè es calmi i la seva conducta és molt més tranquil·la.

Després d'un temps començà a dormir amb Protac Ball Blanket totes les nits, demanant-nos-la també quan no la trobava preparada al seu llit.

Trastorns del son

Home de 38 anys amb trastorns del son: "Sempre he dormit molt poc, em despertava moltes vegades amb qualsevol soroll i per qualsevol cosa. Però tot va canviar quan vaig començar a utilitzar Protac Ball Blanket. Ara no em desperto més d'un o dos cops i torno a agafar la son molt fàcilment. Anteriorment em costava mitja o, fins i tot, una hora sencera tornar-me a dormir novament, però això ja s'ha acabat. La meua dona diu que ara em veu molt més feliç i que sóc més simpàtic. Després de les primeres nits amb Protac Ball Blanket em vaig quedar veritablement impactat pel bé que havia dormit, mai vaig pensar que un dia seria capaç de dormir així. Fins i tot durant els dies més estressants segueixo dormint infinitament millor amb la manta de boles. Abans, els dies d'estrès eren insuportables, no podia dormir gens a la nit. Sóc molt feliç per haver tingut l'oportunitat de provar la Protac Ball Blanket i per poder-la utilitzar totes les nits."

Dona de 31 anys: "Després d'un període de dos anys no dormint gairebé res, estava desesperada intentant trobar un remei. Vaig provar de dormir a terra, en el lavabo, al sofà, canviant la posició del llit, posant i traient coixins, meditant, escoltant CDs d'hipnoteràpia, me n'anava a dormir aviat, em prenia valeriana i infusions... Però era inútil, era incapaç de desconnectar a les nits, ni de cos ni de ment. Aleshores vaig provar Protac Ball Blanket i inexplicablement em va ajudar! La manta m'aplicava pes sobre el meu cos i això em relaxava. Ara per fi puc dormir a les nits, a vegades amb la manta de boles i a vegades sense."

Investigació:

Protac Ball Blanket™ ajuda als nens mb TDAH

Els nens amb TDAH dormen millor i tenen més capacitat per concentrar-se quan utilitzen Protac Ball Blanket. Aquestes van ser les conclusions d'una investigació realitzada a la University of Southern Denmark l'any 2011.

Segons la investigació, els nens amb TDAH aconseguixen adormir-se abans i gaudeixen d'un son amb menys interrupcions quan usen Protac Ball Blanket. A més, l'estudi mostra, d'acord amb els seus pares i professors, que els nens són capaços de concentrar-se més en les seves tasques durant el dia.

Millora del son amb la manta de boles

Durant el projecte d'investigació es van formar dos grups, un grup de nens amb TDAH i un grup de control de nens sense TDAH. Ambdós grups foren objecte de seguiment durant 28 dies. Primer de tot, els investigadors van mesurar els patrons de son de tots els nens. Un cop obtinguts, van dormir durant un període de 14 nits amb la Protac Ball Blanket. Tot just acabat, van tornar a dormir durant una setmana amb els seus edredons habitu-

als. En tot el procés els nens van dormir monitoritzats amb un equip de mesura avançat, mentre els seus pares escrivien en un diari les seves percepcions de com havien dormit cada nit els seus fills. Finalment, els investigadors van concloure que el període de latència de l'inici del son (SOL) dels nens amb TDAH es va reduir quasi un 40% i que es corresponia amb el dels nens del grup control que no pateixen TDAH. A més, els nens amb TDAH eren menys propensos a despertar-se durant la nit.

Estudis anteriors havien demostrat que hi ha una estreta connexió entre dormir poc i les dificultats d'aprenentatge. Els professors també han percebut una millora del 10% en referència a la seva hiperactivitat i manca d'atenció, mentre que els seus pares han percebut una millora del 6%. L'efecte més positiu és que la millora persisteix en el temps, fins i tot quan els nens continuen dormint amb els seus edredons convencionals.

Bona alternativa als medicaments

També es va concloure que Protac Ball Blanket és una bona alternativa per tractar els trastorns del son a nens amb TDAH i que pot aconseguir substituir totalment o parcial els tractaments farmacològics.

La investigació va ser dirigida pel professor de Psiquiatria Infantil de l'Odense University Hospital, Niels Bilenberg, i pel psiquiatre infantil del departament de Psiquiatria Infantil de la regió sud de Dinamarca a Esbjerg, Allan Hvolby. Els resultats de la investigació es van publicar a l'International Nordic Journal of Psychiatry a l'abril del 2011. Actualment, el projecte continua mitjançant una investigació de llarga durada finançada per la regió sud de Dinamarca.

Més informació:

informahealthcare.com/toc/psc/65/2

Es pot facilitar una còpia de l'article original prèvia petició (en anglès)

Efecte

Documentat



TESTIMONIS

Protac SenSit®

TDAH

Declaracions d'un terapeuta referint-se a un nen de 13 anys amb TDAH: "Puc veure grans millores en la manera de relacionar-nos amb el noi i en el seu comportament, molt més tranquil mentre fem sessions de teràpia ocupacional a la cadira i també durant tot el dia en general. Sovint simula que està adormit amb la intenció de romandre assegut una estona més després de les sessions terapèutiques. Se'l veu més calmat i cooperatiu, i molt feliç d'utilitzar el puf SenSit". Molts cops fa broma dient: "Algún dia m'emportaré aquest puf a casa meva quan t'agafi desprevingut."

Ansietat

"Estava participant en una activitat grupal i sobtadament vaig experimentar un atac de pànic molt greu.

Vaig fer tres o quatre passes molt inquiet pensant que queia i em vaig asseure al puf, aleshores el meu estat d'inquietud i agitació va desaparèixer gradualment, tenia la sensació d'estar arraulit en un niu, les "ales" del puf SenSit estan dissenyades de manera que sembla que t'estiguin abraçant. Després d'uns 10 minuts, el meu pànic va minvar."

Trastorns neurològics

Home de 64 anys que pateix demència vascular. Resulta impossible de convèncer que necessita descansar. L'equip mèdic ha provat un ampli ventall d'estratègies que han acabat amb el pacient enfadat i sense voluntat de cooperar. Per contra, Protac SenSit va resultar efectiu, al pacient li va encantar i aviat s'hi va asseure i comprenqué que servia per descansar i relaxar-se. El personal li adaptà la sala a fi de descansar millor, van córrer les cortines i s'asseguraren que tot restés en silenci, fins que començà a adormir-se en el puf. Un parell de cops arribà a dormir gairebé dues hores. Poc temps després, quan sentia la necessitat de descansar, ja l'utilitzava tot sol sense que calgués acompanyar-lo. El puf va romandre a la seva habitació tres setmanes, essent part del programa de rehabilitació. L'estat de calma i descans que li proporcionava es veia reflectit en una actitud molt més positiva i col·laboradora en el seu procés de rehabilitació.

Inquietud mental i motora

Nena de 4 anys que presentava molts canvis emocionals, problemes físics i d'ansietat que l'afectaven en el seu dia

"Sisplau, digueu-li a ma mare on pot comprar un puf com aquest". Observant la seva conducta, els seus pares van intentar confeccionar-ne un de semblant però, tot i així, sa mare ens confessà: "al final haurem de comprar un d'aquests, és l'única forma de veure al nostre fill tan calmat"

a dia. El seu estat d'agitació va disminuir en asseure's al puf SenSit. Des de la sala de pràctiques d'habilitats motores anava fins al puf i, després de 5 o 6 minuts d'estar asseguda i tranquil·la, començava a comunicar-se. La seva parla va anar millorant a poc a poc, essent cada dia més coherent. Quan fa activitats motores se la veu amb millor to que abans de començar a utilitzar SenSit. Moltes vegades es queda asseguda a l'hora de fer activitats que requereixen coordinació mà-ull i, com a resultat, ha millorat qualitativament el nivell de les seves activitats.

Un nen de 6 anys amb dèficit d'atenció i hiperactivitat, després d'usar SenSit en diverses ocasions ens demanava; "Sisplau, digueu-li a ma mare on pot comprar un puf com aquest". Gaudeix molt arraulint-se sota dels coixins, fins i tot també demana que li posem la manta de boles Ball Blanket a sobre. Observant la seva conducta, els seus pares van intentar confeccionar-ne un de semblant però, tot i així, la seva mare ens confessà: "al final haurem de comprar-ne un d'aquests, és l'única forma de veure al nostre fill tan calmat". El nen usa SenSit al final de cada sessió terapèutica. El resultat és evident, se'l veu més tranquil, ha millorat la seva concentració i, quan surt de la sala de tractament, continua calmat durant tota la resta del dia.

Trastorns mentals

Noia de 20 anys amb problemes mentals i diverses temptatives de suïcidi que varen comportar el seu ingrés a l'àrea psiquiàtrica de l'hospital de la seva ciutat. Durant la seva estada intentà autolesionar-se contínuament.

Al començament, el personal de l'hospital va encoratjar la pacient a usar SenSit, desenvolupant progressivament la seva pròpia manera d'utilitzar-lo. Sent que pot recuperar el control del seu cos i la seva ment, i que és millor intentar combatre l'instint d'autolesió pe si mateixa.

A més, l'equip mèdic li va fer portar un puf SenSit a la seva habitació perquè el fes servir sempre que en sentís la necessitat i calmar la seva ansietat.

Trastorns del desenvolupament

Home de 38 anys que presenta discapacitat intel·lectual, viu a una residència amb persones de característiques semblants, tot i que disposa d'habitació pròpia. Utilitza Protac SenSit tant al seu dormitori com a les zones comunes. També té una manta de boles que li encanta usar cada dia. Té plena mobilitat.

El personal del centre ha observat que li agrada molt utilitzar el puf, on hi passa hores assegut, cosa impossible a qualsevol altre mobiliari, perquè es tracta d'una persona molt inquieta. També se n'han adonat que roman més temps a les zones comunes que abans, però el gran avantatge que li proporcionen, tant la manta como el puf, és que no cal que vagi a dormir per reduir el seu estat d'agitació.

Ara pot dormir molt millor a les nits, no s'adorm involuntàriament a petites estones en el transcurs del dia... altrament dit: està progressant amb una participació més activa a les activitats de grup i en la seva relació amb la gent, està més despert i preparat per emprendre qualsevol activitat.

Protac SenSit®, Puf i Mòdul de Peus

– embolcalla i calma el cos

Calm and concentration

Protac SenSit és un puf d'estimulació sensorial que proporciona una gran sensació de seguretat i de calma, a més d'un increment del nivell de concentració de l'usuari. Protac SenSit pot beneficiar a nens, adults i persones grans que pateixen hiperactivitat física i/o mental. El puf està farcit de boles al seient, al respall i en els coixins amb forma d'ales de la seva part superior i laterals. Aquestes ales poden col·locar-se al voltant de o a sobre del cos com convingui, calmant d'aquesta manera a l'usuari.

Utilitats pràctiques

Protac SenSit ofereix nombroses utilitats i encara n'estan apareixen de noves a llars d'infants, escoles, centres psiquiàtrics, hospitals, llars, sales d'espera, sales d'estimulació multisensorial (snoezelen) i sales terapèutiques convencionals.

Protac SenSit es pot fer servir per relaxar-se mirant la televisió o utilitzant la tauleta, per exemple. Per als nens inquietos, el puf els ajuda a concentrar-se a

l'hora de fer els deures o divertir-se amb jocs que requereixen certa atenció. A les llars d'infants i a les escoles, Protac SenSit pot servir per desconectar després d'un exigent dia d'escola. També als centres psiquiàtrics i centres de dia per a pacients amb trastorns del desenvolupament proporciona un lloc on sentir-se segur. A més, pot utilitzar-se en àrees comuns per les persones que no suporten estar envoltats de gent contínuament.

Teràpia i activitat

El puf Protac SenSit l'utilitzen terapeutes i altres professionals com una eina d'estimulació sensorial en els llocs destinats a aquest fi. El puf reforça la consciència corporal de l'individu, produint un efecte calmant. També es pot utilitzar com a preparació al tractament, per relaxar el to muscular i preparar-se físicament i mentalment abans de qualsevol activitat.

Una altra manera de seure

Protac SenSit és una bona alternativa per als usuaris de cadires de rodes i per als pacients enllitats que necessiten canviar

de posició sovint durant el dia. La forma del puf proporciona suport a coll, cap i cos. El puf SenSit, mercès a la flexibilitat de les boles del respall i del seient, s'adapta totalment a la manera de seure de cada usuari.

Disseny i colors

Protac SenSit presenta un disseny modern disponible en vuit colors. També està disponible en dues mides per adaptar-se a l'altura de l'usuari. El recobriment disposa de cremallera per poder rentar-lo en una rentadora convencional, encara que normalment es podrà netejar fàcilment amb l'ajuda d'un drap humit i desinfectant.

Mòdul de peus SenSit

El mòdul de peus SenSit pot usar-se per descansar-hi les cames quan estem asseguts en el puf SenSit o bé per separat, com un tamboret. Les boles de la part superior són molt estimulants. Sovint, en algunes escoles l'utilitzen com a seient a les classes dels més petits.

Protac SenSit®

Embolcalla l'usuari

Calma i relaxa

Proporciona sensació de seguretat

S'adapta a qualsevol posició

Assegura una manera còmoda de seure



Disseny
Danès

TESTIMONIS

Protac MyFit®

TDAH

Declaracions d'un professor especialista: "Vaig viure una experiència fantàstica a la meua consulta amb un nen de 10 anys amb TDAH i un trastorn afectiu que va venir per abordar les habilitats cognitives i socials. Era extremadament inquiet i engrescat, la seva estratègia de defensa era fer el ruc. Mai havia experimentat un canvi tan gran, tant a les seves habilitats motores com a les emocionals, com va ocórrer amb el nen després de posar-li l'armilla de boles. Es va assegurar a la seva cadira i es va convertir en un noi completament calmat, va ser capaç de romandre concentrat 20 minuts, va ser fantàstic!"

Estudiant de 24 anys diagnosticat de TDAH que va començar a posar-se l'armilla: "Crec que l'armilla és un producte que està molt ben dissenyat, per la seva aparença i pels seus efectes. No només em calma, a més em fa estar en una millor postura. Quan m'assec amb ella, sembla que m'estigui fent un massatge, que agraeixo després d'una activitat. A l'institut, alumnes i professors m'han comentat que em veuen més tranquil d'ençà que utilitzo l'armilla. Molts cops la comparen amb una armilla antibales, i la veritat és que s'hi assembla una mica, els meus amics que l'han provada, diuen que els hi donava una sensació molt bona, vaig poder observar clarament com es relaxaven als 10 minuts de portar-la."

Autisme

Valoració d'una professora després de provar l'armilla en un nen amb trastorn autista d'11 anys i dificultats d'aprenentatge: "Ha utilitzat l'armilla unes quantes vegades al dia a l'escola. Ara participa molt més en les activitats de classe i està més tranquil."

Sordera i/o ceguera

Un terapeuta ocupacional d'una escola

per a cecs i sords va provar l'armilla en nens de dos a cinc anys amb deficiència visual. "Utilitzem l'armilla en els tests de sensibilitat motora i curiosament tenim problemes perquè els nens no se la volen

"Ha après a anar en bici perquè, com ell diu, mentre porta l'armilla de Batman, pot controlar molt millor el seu cos."

treure a l'hora d'acabar, se senten molt còmodes i feliços."

Trastorns neurològics

Dona de 45 anys que ha patit un accident vascular cerebral amb paràlisi a la part esquerra del seu cos. Els seus comentaris sobre l'armilla van ser els següents: "Amb l'armilla em resulta molt més senzill moure el peu esquerre correctament i caminar evitant que se'm torci. Deu ser perquè l'armilla m'ajuda a reduir l'espasticitat. Sento el meu cos molt millor. Quan em poso a treballar, és como si m'animés a corregir la meua postura. A més, sortir a caminar amb ella esdevé un exercici extraordinari. Quan t'acostumes a portar-la, resulta molt còmoda."

Patologia neurològica

Home de 73 anys amb Parkinson, "Utilitzo l'armilla durant el dia quan toco el piano, escric i faig tasques habituals de casa. M'aporta sensació de pau interior i em sento molt més capacitat per fer la meua

feina. Em proporciona seguretat, una respiració profunda i una postura més recta.

Hiperactivitat mental i motora

"Quan ens van deixar provar l'armilla un cap de setmana, van ser els dies més tranquils amb diferència, feia molt de temps que no gaudíem d'aquesta pau. L'armilla en va ser el veritable motiu".

Un terapeuta infantil que havia provat l'armilla en un nen de set anys amb hiperactivitat i retard del desenvolupament psicomotor, ens deia sorprès: "Ha après a anar en bicicleta, el noi afirma que pot controlar molt millor el seu cos quan porta l'armilla de Batman."

"Puc concentrar-me durant períodes bastant més llargs que abans, també he notat que la meua respiració ara és molt més profunda" ens va comentar una dona de 52 anys amb dificultats per concentrar-se.

Trastorns mentals

Un terapeuta ocupacional destinat a tractar pacients amb TDAH en un centre psiquiàtric va comentar: "Els meus pacients han començat a posar-se l'armilla per iniciativa pròpia quan se senten inquietos o han d'atendre una reunió important."

Dolor

Dona de 37 anys amb dolor d'esquena: "Em sento relaxada quan porto l'armilla posada, el dolor desapareix. Em genera una escalfor agradable a l'esquena i em proporciona una agradable pressió i sensació de pes que m'ajuda a sentir-me amb els peus a terra, i puc concentrar-me en allò que estic fent amb més facilitat."

Protac MyFit®

– millora la consciència corporal i transmet un efecte calmant

Concentració i aprenentatge

Protac MyFit és una armilla calmant pel fet que ajuda a delimitar el cos a l'espai a nens, adults i persones grans que presenten hiperactivitat en situacions d'estrès i ansietat. El pes i la pressió de l'armilla, que s'ajusta perfectament al cos, millora la consciència corporal produint un gran efecte calmant.

Escola i feina

Els nens i els adults amb dificultats d'atenció i problemes d'aprenentatge poden gaudir dels beneficis de Protac MyFit a l'escola o a la feina. Els nens, per exemple, poden portar l'armilla a l'hora del pati si tenen dificultats per jugar amb altres nens. Els pàrvuls poden utilitzar-lo a les activitats grupals, a l'hora dels àpats o quan juguen. Als adults amb dificultats d'atenció, Protac MyFit els pot ajudar en els àmbits educacionals, treballant, llegint...

Activitats diàries

Per als adults que pateixen ansietat i hiperactivitat, Protac MyFit esdevé una gran ajuda quan surten a comprar o han de fer qualsevol tasca de la llar, com cuinar.

Comportament violent

Protac MyFit també és una manera molt efectiva de combatre l'agressivitat, l'ansietat i el comportament autolesiu, beneficiant la persona que ho pateix i a les persones del seu voltant.

Teràpia i entrenament

Protac MyFit l'utilitzen els terapeutes i altres professionals relacionats amb el tractament del processament sensorial i l'entrenament motor a l'equilibri i la coordinació. L'armilla també està destinada a nens i a adults a qui els resulta difícil cooperar, ordenar les seves idees i concentrar-se durant l'activitat cognitiva, la teràpia del llenguatge, l'entrenament

ADL o el tractament d'acord amb els principis d'Affolter, Bobath i Coombes (concepte ABC). A més, s'utilitza per tractar els efectes d'una hemorràgia cerebral en adults, reforçar el seu sentit de l'equilibri, reduir l'espasticitat i combatre alteracions sensorials. Protac MyFit també és útil en el treball amb els pacients amb dolor, ja que augmenta la consciència corporal, afavoreix una millor postura i relaxa la musculatura.

Disseny i talles

Protac MyFit està fabricat amb material elàstic, adaptant-se completament a la forma del cos. Les boles estan distribuïdes en canals tant a la part frontal com a l'esquena. Disposa d'una goma elàstica per ajustar, prémer o afloixar l'armilla segons les necessitats sensorials de la persona. Està disponible en 3 talles infantils i 5 d'adults. Les talles s'han establert segons el perímetre toràcic.

Protac MyFit®


Delimita el teu cos a l'espai

Reforça la consciència corporal

Efecte calmant

Combat l'estrès, l'agitació i l'ansietat

Afavoreix l'aprenentatge

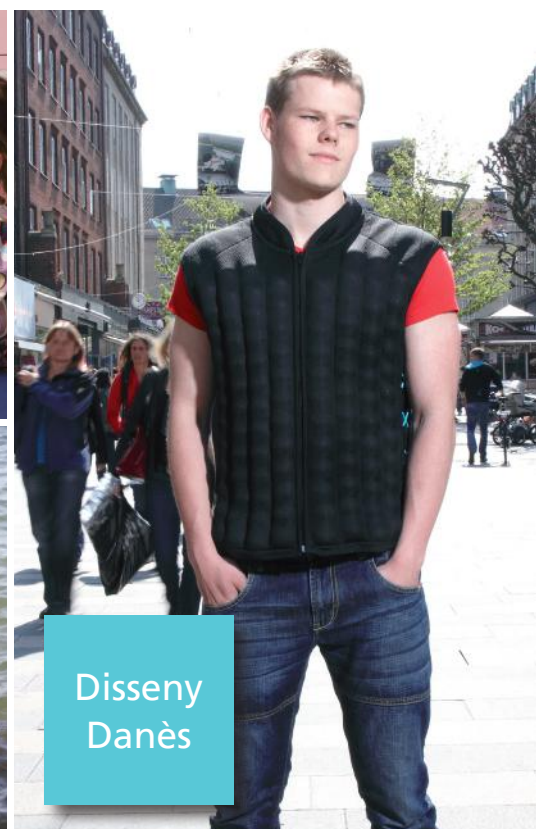

Disseny Danès

TESTIMONIS

Protac Ball Cushion™

TDAH

Nen de 10 anys diagnosticat de TDAH. Presenta inquietud mental i motora, factors que li dificulten l'atenció. El noi reflectia una conducta molt disruptiva a classe, no deixava de moure's de la seva cadira i feia molt soroll. Ara utilitza BallCushion i roman tranquil•lament assegut molta més estona, a més sembla estar bastant més atent i menys sorollós. Utilitza el coixí a totes les activitats que impliquin estar assegut i atent.

Conversa entre una mare i un terapeuta ocupacional sobre el seu fill de vuit anys: "Se sent més llest d'ençà que li van deixar Ball Cushion a l'escola, un dia va arribar i em va dir: "mamà, abans em costava una hora fer quatre sumes i ara en puc fer sis."

Dèficit d'atenció

Nen de 4 anys amb dificultats per romandre atent i concentrar-se a l'hora de seure a taula, problema que es presenta també a casa, no només a l'escola. Protac Ball Cushion ha estat efectiu tan aviat com se l'ha posat, ajudant-lo a romandre assegut sense posar-se tan nerviós. Utilitzant una altra unitat com a reposapeus s'ha aconseguit que estigui atent, tranquil i capaç de seguir qualsevol conversa de la taula.

Nena de 6 anys que fa sessions de logoteràpia, se li observa un dèficit en el to dels músculs posturals, del que se'n deriven dificultats per seure correctament en una cadira. En proporcionar-li Ball Cushion se li observa una correcció postural immediata i en les sessions següents també indicis evidents d'estar més atenta, quedant-se més estona asseguda i concentrada sense cansar-se.

Alumna amb dificultats per estar atenta i asseguda en una cadira. S'asseu de genolls, recolzant-se sobre la taula i no para de canviar de posició. Ara, amb Ball Cushion, pot quedar-se asseguda i completament tranquil•la. Dos dies després

és capaç de romandre alerta durant un període de temps més llarg i en silenci. És molt conscient que Protac Ball Cushion és bo per a ella, allà on vagi se l'endú sota el braç, sigui per jugar amb l'ordinador, per llegir o per a qualsevol altra ocupació.

"Vaig pensar que seria un problema per al nen haver de seure sobre aquest coixí, que sentiria vergonya en seure en un lloc diferent del dels seus companys, però la realitat és que li encanta, només se separa del coixí per deixar-lo als seus amics i, a més, ara està molt més calmat i segur de si mateix."

Articulacions hipotòniques i hipermòbils

Nena de preescolar amb hiperlaxitud articular, problemes a les articulacions, a més de trastorn de processament sensorial moderat. Té dificultats per seure correctament durant gaire temps, es cansa, deix d'estar atenta i adopta una posició encorbada. Des que utilitza Ball Cushion és capaç de seure millor durant les classes i ha superat els problemes d'equilibri que presentava.

Nen de 8 anys amb baix to muscular i articulacions hipermòbils. Li resulta difícil romandre quiet i ben assegut durant les classes a l'escola i també a l'hora dels àpats a casa. Necessita recolzar-se contínuament en la taula -fins i tot en la del seu company- per evitar desplomar-se, degut a la debilitat muscular. Des del moment que va començar a utilitzar Ball Cushion la seva postura va canviar ràpidament i també la seva habilitat per seure i en silenci. Al noi li resulta imprescindible Ball Cushion i l'escola decideix comprar-lo,

prescrivint el seu terapeuta ocupacional una altra unitat per utilitzar a casa a l'hora dels àpats i per fer les feines de l'escola.

Recordo dos nens de l'escola on treballa, amb extrema hipermobilitat, molt inquietos. El seu pediatre va prescriure un parell de Ball Cushions a cadascun per utilitzar-los per seure i per posar-hi els peus a sobre. La seva reacció va ser sorprenent, tant en la forma de seure més correcta, com en la seva actitud i participació a les classes, que van augmentar exponencialment. Ara l'escola utilitza aquests coixins en totes les classes, al menjador i també arreu on es fan activitats que requereixin més nivell d'atenció als nens.

Inquietud mental i motora

Nen que pateix acatisia extrema, condició marcada per la hiperactivitat motora caracteritzada des de l'ansietat a la incapacitat de seure tranquil•lament i fins i tot dormir.

Tot i que el seu mestre de preescolar n'era escèptic, el terapeuta ocupacional va decidir proporcionar-li Ball Cushion. "Vaig pensar que seria un problema per al nen haver de seure sobre aquest coixí, que sentiria vergonya en seure en un lloc diferent del dels seus companys" -ens va comentar el seu mestre-, "però la realitat és que li encanta, només se separa del coixí per deixar-lo als seus amics i, a més, ara està molt més calmat i segur de si mateix" -va afegir-.

Problemes d'equilibri

Dona de 45 anys amb esclerosi múltiple, en tractament per disminuir els seus problemes d'equilibri i de motricitat fina. També pateix dolor intens d'esquena. Amb aquest quadre es va decidir prescriure-li un Ball Cushion per fer els exercicis de motricitat asseguda. Ràpidament notà una disminució del dolor, a més el seu equilibri va millorar gràcies a la flexibilitat de les boles del coixí.

Protac Ball Cushion™

– estimula i fomenta una posició correcta

Atenció i aprenentatge

Protac Ball Cushion ajuda a mantenir una postura correcta i és adequat tant a nens com a adults que, degut a la hiperactivitat, tenen dificultats per romandre quietos i atents.

Quan l'usuari es mou, les boles també es mouen, de tal manera que el centre de gravetat va variant de posició. En conseqüència, el cos intentarà automàticament variar la distribució del seu pes per mantenir l'equilibri, estimulant la musculatura estabilitzadora de l'esquena i dels abdominals. Per obtenir una postura òptima a la cadira, és important que els peus de l'usuari estiguin ben aposentats. Protac Ball Cushion i Protac GroundMe poden utilitzar-se perfectament com a seient o com a reposapeus i en recomanem la combinació per proporcionar una estimulació sensorial òptima.

Activitats a l'escola

Protac Ball Cushion és un gran ajut per als

nens amb hiperactivitat a l'escola. És fàcil de col·locar a qualsevol cadira i ocupa molt poc espai a la motxilla, essent fàcil de portar a sobre durant les activitats de tot el dia. És una eina vital per desenvolupar la musculatura estabilitzadora i postural, oïmes en nens amb debilitat en aquesta musculatura, fomenta una bona postura i ajuda a mantenir l'atenció i, per tant, a millorar l'aprenentatge. Els adults també poden gaudir dels seus beneficis, tant a la feina com a casa.

Teràpia i tractament

Els professionals mantenen una opinió positiva sobre l'ús de Protac Ball Cushion en els tractaments de l'equilibri. Parlen de la posició asseguda dinàmica que ofereix aquest producte, que ajuda a mantenir activa la musculatura estabilitzadora de l'esquena i de l'abdomen. La pressió de les boles permet a l'usuari calcular perfectament l'àrea on ha de seure, tot estimulant els músculs posturals i millorant la postura.

Tipus de Ball Cushion

Protac Ball Cushion està disponible en diverses mides. Ha estat especialment dissenyat per adaptar-lo a qualsevol tipus de cadira o seient d'escoles i llars. Per proporcionar una estimulació òptima, la cadira no ha d'estar encoixinada ni tenir cap superfície tova.

Ball Cushion per cadires d'escola i cadires convencionals és disponible en dos tipus: d'un sol compartiment i de quatre compartiments per limitar el moviment de les boles i ser més convenient a persones amb problemes d'equilibri o amb un sistema sensorial hipersensible.

Tots els coixins disposen de boles de plàstic, uns amb boles d'un diàmetre de 38 mm i altres amb boles de 25 mm. Els de boles de 38 mm proporcionen més estimulació, mentre que els que les porten de 25 mm presenten una superfície més còmoda per seure a persones molt primes o particularment sensibles.

Protac Ball Cushion™

Combat la hiperactivitat

Enforteix l'equilibri i la sensibilitat

Exercita els músculs de l'esquena i dels abdominals

Fomenta una postura correcta

Facilita l'atenció i millora l'aprenentatge



Disseny
Danès

TESTIMONIS

Protac GroundMe®

TDAH

Nena de 9 anys amb trastorns del desenvolupament i TDAH. Utilitza Protac GroundMe durant els àpats i quan fa els deures, donat que té dificultats per no moure's i estar atenta. El seu terapeuta va comentar: "Me n'he adonat que està més tranquil·la i atenta quan utilitza GroundMe. Ha aconseguit seure correctament. Normalment, està molt inquieta i arriba a deixar de menjar aixecant-se de taula perquè és incapaç de romandre asseguda. Aquest reposapeus l'ajuda a acabar el que està fent."

Autisme

Nen autista de 8 anys: "L'utilitzo cada dia i crec que treballo millor, em sento més calmat."

"Estem atenent una nena de 5 anys amb autisme i trastorns sensorials tan severos que ha sigut difícil trobar una institució que li proporcionés una oferta educativa adequada. Ara es posa l'armilla MyFit fora de casa, s'asseu sobre el Ball Cushion i usa GroundMe amb excel·lents resultats" -ens comenta un mestre especialista-

Concentració

Educador social d'una escola ordinària: "Tenim dos nens a qui GroundMe els és particularment beneficiós. Atenen millor, arribant a poder realitzar activitats molt més complexes.

També utilitzem GroundMe quan ens reunim en grups, poden asseure's a terra sense cansar-se ni deixant d'estar atents. Com a conseqüència, participen molt més a les activitats i s'ho passen més bé."

Inquietud mental i motora

Nena de 10 anys amb dificultats per romandre asseguda, amb dèficit d'atenció i de consciència corporal. La seva terapeuta explica: "Se li observa una millor sensació de benestar quan fem activitats a taula si pot posar els peus sobre GroundMe. La seva hiperactivitat s'aprecia molt a les seves extremitats inferiors i li resulta imprescindible l'ús de Protac GroundMe. Més encara, la gran evidència de la importància que significa per a ella és que, cada cop que canvia de lloc, mai oblida emportar-se GroundMe, quelcom impensable si realment no li importés, donat lo despistada que és."



Protac GroundMe®

– proporciona calma i sensació de connexió

Atenció i aprenentatge

Protac GroundMe és un coixí i reposapeus dinàmic per a nens, adults i persones grans que, degut a la seva hiperactivitat, presenten dificultats per estar atents durant períodes sostinguts de temps. Com a tamboret o com a coixí, Protac GroundMe estimula el sentit del tacte i contribueix a la calma, al nivell d'atenció i a la millora de l'aprenentatge. Protac GroundMe també permet aconseguir una postura òptima i reduir els tics nerviosos, especialment dels peus. La combinació de Protac GroundMe i Protac Ball Cushion proporciona una estimulació idònia.

Activitats a l'escola

Protac GroundMe actua de coixí o de reposapeus assegurant un bon punt de partida per a una correcta postura en seure. Gràcies al seu efecte estimulador, Protac GroundMe també ajuda als nens

hiperactius a romandre asseguts tranquil·lament, ja sigui perquè no els arriben els peus a terra o perquè cerquen l'estimulació sensorial amb el moviment dels peus. Els adults i les persones grans també es beneficien de GroundMe quan estan treballant, menjant o descansant en el sofà. L'exemple més clar i on s'observen millor les qualitats de GroundMe és a les escoles al realitzar activitats grupals asseguts a terra: al seure sobre GroundMe la participació i el nivell d'atenció dels nens augmenta molt significativament.

Teràpia i tractament

Protac GroundMe l'utilitzen terapeutes i altres professionals com a eina de tractament de la motricitat dels nens. Col·loquen els coixins a terra com a part del tractament per fer exercicis d'equilibri i coordinació.

Disseny i mesures

Protac GroundMe té una base d'escuma sobre la que hi ha una capa de boles de plàstic, tot plegat embolcallat per una funda exterior elàstica. Les nanses a cada costat del coixí afegixen més funcionalitat i permeten penjar-lo a qualsevol lloc quan no es fa servir. Protac GroundMe es presenta en dues altures, 10 i 20 cm, per adaptar-se a qualsevol usuari i ús.

Protac GroundMe®

Augmenta la sensació de "tenir els peus a terra"

Evita els tics nerviosos dels peus

Facilita una postura correcta

Proporciona calma i més nivell d'atenció

Afavoreix l'aprenentatge



Danish Design

TESTIMONIS

Protac KneedMe®

Demència

Dona de 62 anys amb Alzheimer, greu deteriorament físic, mental i cognitiu, a més de depressió. Se sent molt incòmoda degut a la seva hiperactivitat. Li resulta molt difícil discriminar els seus estímuls i, per tant, pateix hipersensibilitat. Tot això es manifesta en moviments físics agressius i en una veu enfadada, punt que comporta que calgui separar-la d'altres persones i passar moltes hores sola a la seva habitació.

Com que no acceptava que el personal del centre se n'ocupés de la seva cura personal, es va decidir utilitzar Protac KneedMe mentre es duia a terme aquesta activitat. Se li va oferir l'opció de quedar-se al llit amb KneedMe posat per sobre o ser transferida a una cadira, també amb KneedMe, segons se sentís més còmoda i segura. Als matins, quan se la veu molt nerviosa, li posen KneedMe i esperen a fer la higiene personal fins que es calma.

Dona que es mou amb una cadira especial per a pacients amb Corea de Huntington. Utilitza diàriament Protac KneedMe so-

bre la seva falda. Mentre el fa servir se la pot veure somrient, relaxada i molt més amable. Hi ha cops que fins i tot gira el cap per agrair-te el que fas per ella. A més, a l'hora dels àpats es mostra molt més calmada que abans d'utilitzar Protac KneedMe.

Senyora d'uns 70 anys que pateix demència de cossos de Lewy. Es mou amb cadira de rodes i necessita assistència en el seu dia a dia. Presenta moviments espasmòdics típics del Parkinson, una atenció fluctuant i també, de tant en tant, al·lucinacions. Quan té crisis psicològiques, crida ben fort amb veu continuada i monòtona. Ha utilitzat Protac KneedMe durant alguns mesos. L'objectiu era que interaccionara socialment i que participés en activitats musicals. Des d'un bon començament es va observar que KneedMe li proporcionava bons resultats, després a poc a poc podia estar més atenta i concentrada en la música, arribant a emetre alguns sons monòtons.

Ara se li facilita Protac KneedMe en diverses ocasions, per prevenir situacions

agressives i per calmar-la. El resultat és una reducció general de la hiperactivitat, major benestar i una expressió facial molt més relaxada, se li observa menys sons autoestimulants i a vegades manté contacte visual, somriu i arriba a dir algunes paraules. Normalment, després d'un parell d'hores se li retira Protac KneedMe i segueix mantenint els bons resultats.

Dona de 80 anys diagnosticada amb Alzheimer. Té tendència a emetre sons autoestimulants. Canta insistentment i es parla a si mateixa en veu alta. Cada matí, a l'hora de la higiene personal, li posen KneedMe a la falda per intentar reduir els seus crits.

Els resultats han estat evidents des del primer cop que el va provar, se li nota la veu molt més tranquil·la i parla de manera més civilitzada. Després d'usar el davantal KneedMe, la seva expressió facial es torna més amable que de costum. Ara l'utilitza durant alguns minuts cada dia.



Protac KneedMe®

–proporciona pau interior i sensació de seguretat

Peace and a sense of security

Protac KneedMe és una manta/davantall d'estimulació sensorial per a la falda, indicada per als nens, adults i persones grans amb trastorn d'hiperactivitat. En posar Protac KneedMe a la falda, el pes i la pressió profunda de les boles ajuden a tenir consciència del contorn corporal i proporciona una gran sensació de calma i seguretat. És perfecta per a les persones amb tics nerviosos a les cames i els peus que normalment van associats a la hiperactivitat o a la síndrome de les cames inquietes. Es pot utilitzar tant en cadires convencionals com en cadires de rodes durant qualsevol activitat.

Aplicacions pràctiques

Actualment, Protac KneedMe ha esdevingut una eina apreciada a molts hospitals, centres de rehabilitació, centres psiquiàtrics, residències, centres de dia, sales multisensorials i, també, a multitud de llars.

Teràpia i tractament

Protac KneedMe és utilitzat per terapeutes i professionals especialment en activitats de motricidad, amb pacients que els resulta difícil cooperar i mantenir-se concentrats. Protac KneedMe també ha demostrat ser beneficiós en les activitats cognitives, en la teràpia del llenguatge, en la higiene personal, programa ADL o tractament segons els models de Affolter, Bobath i Coomber (concepte ABC).

Disseny

Protac KneedMe consisteix en una funda i una bossa extraïble amb boles pesades de plàstic distribuïdes en canals. La manta/davantall està equipada amb un cinturó per subjectar-la a la cintura de l'usuari i evitar que llisqui. Quan no s'utilitza el cinturó, queda ben recollit a la seva funda. La funda pot rentar-se separatament.

A la part superior de Protac KneedMe hi ha una gran butxaca on l'usuari pot amagar les seves mans o desar els seus objectes preferits. Dins hi ha una anella tipus clauer per penjar-hi objectes tàctils, sonalls o el que se'ns pugui ocórrer.



Disseny
Danès

Protac KneedMe®

Millora la propiocepció

Proporciona calma i sensació de seguretat

Augmenta la capacitat d'atenció

Facilita la cooperació



TESTIMONIS

Protac MyBaSe®

Sordceguesa

Escola d'Aalborg, jove sordcec de 17 anys, va en cadira de rodes i depèn d'ajuda per a qualsevol activitat, ja que només pot fer petits moviments amb el braç i amb la cama. Li agrada deixar a un costat la cadira de rodes i jeure sobre Protac MyBaSe mentre rep estimulació vestibular i tàctil en cada moviment. La cosa important és que no és necessari que es mogui gaire per rebre estimulació del matalàs. És increïble veure com gaudeix sentint el seu propi cos mentre s'estira sobre el matalàs.

Home sordcec de 28 anys, pot veure ombres i escoltar una mica amb ajuda auditiva. Va en cadira de rodes i és molt dependent. Reacciona molt be a l'estimulació tàctil i al moviment passiu. Un dia, quan estava de mal humor i fent sons desagradables, vam utilitzar el matalàs per oferir-li estimulació tàctil i ajudar-lo a ser conscient del seu cos, tot just uns instants després es va calmar, mirant d'estar ben alerta a tot el que succeïa al seu voltant. Quan vam començar a moure el matalàs, va somriure i va fer gestos de relax i felicitat

Trastorns neurològics

Els auxiliars informen que una nena de 9 anys amb dany cerebral mostra signes clars d'alegria quan se li pregunta si vol estirar-se sobre el matalàs. Va en cadira de rodes gran part del temps. Quan jeu sobre el matalàs pot notar l'activitat del seu cos, fins i tot els petits moviments, sensació que li proporciona felicitat i molta diversió.

Trastorns mentals

Home amb esquizofrènia ingressat en una residència. Utilitza el matalàs per relaxar-se. Presenta conductes obsessives durant el dia i adopta postures rígides i agressives. El matalàs el calma fins al punt de relaxar el seu to muscular, persistint

"És com rebre un massatge just quant m'hi poso a sobre i em quedo quiet" (nen de 10 anys).

"Aquest és el matalàs més guai i divertit que he provat" (nen de 8 anys).

"Tot i que és ferm, la sensació és molt suau" (nena de 8 anys).

llurs efectes força després de deixar-lo.

Teràpia

Terapeuta ocupacional que l'utilitza en una sala Snoezelen: "El faig servir aprofitant la part estable del matalàs, on el pacient pot estirar-se sobre les boles. Sovint el combino amb un projector i música relaxant. Normalment, els pacients paren de parlar quan s'hi estiren a sobre, senyal que s'hi senten segurs i completament calmsats."

Terapeuta ocupacional en una sessió privada: "Al nen li encanta, es mostra molt

cooperatiu en fer exercicis posturals i d'equilibri. El pots usar de moltes formes per tractar la manca de percepció corporal del nen." Comentarís del nen: "És com rebre un massatge just quant m'hi poso a sobre i em quedo quiet". Un altre noi de 10 anys: "Aquest és el matalàs més guai i divertit que he provat". I una nena de 8 anys: "Tot i que és ferm, la sensació és molt suau".

Trastorns del desenvolupament

Informe dels cuidadors d'una nena de 9 anys amb greu discapacitat intel·lectual, molt inquieta i que agafa i mossega qualsevol cosa que veu. Sovint posa a prova els límits del seu cos donant-se cops al cap, als braços i a les cames i contra tot el que l'envolta. Després d'utilitzar el matalàs cada dia a les últimes dues setmanes, els cuidadors han percebut que està molt més tranquil·la i més accessible, gaudeix de ser ella mateixa i de ser capaç de sentir el seu cos.

Mossega les coses amb menys freqüència i la major part del dia està més calmada.

Cases tutelades per a persones amb trastorns del desenvolupament: Els terapeutes utilitzen el costat estable del matalàs combinant-lo amb la manta de boles. Aquestes són les seves conclusions després de tractar a una dona amb ansietat i dany cerebral: "MyBaSe és l'únic lloc on aconseguix calmar-se i trobar-se a si mateixa, sense focalitzar únicament la seva ansietat."

Protac MyBaSe®

– reforça l'equilibri i la consciència corporal

Calma i sensació de seguretat

Protac MyBaSe és un matalàs d'aire amb una part que presenta una superfície plena de boles, dissenyat especialment per proporcionar estimulació sensorial, calma i sensació de seguretat a nens, adults i persones grans amb trastorn mental o inquietud mental i motora. Esdevé una base segura on s'estimulen els sentits tant si l'usuari està dret, camina, gateja, roda o simplement s'hi estira a sobre. Protac MyBaSe té dues cares: una més activa i una altra més estable. La cara activa s'utilitza quan l'usuari necessita exercitar el seu equilibri. Per contra, la part estable del matalàs es fa servir quan la persona necessita calmar-se i relaxar-se.

Aplicacions pràctiques

Actualment Protac MyBaSe s'utilitza a les llars d'infants, residències, sales multisensorials o Snoezelen, sales de tractaments

convencionals, escoles, habitatges tutelats... i també a hospitals, concretament als serveis de rehabilitació.

Ajuda alternativa

Protac MyBaSe és una bona alternativa per als usuaris amb cadira de rodes que necessiten canviar de postura durant el dia. Les boles del matalàs s'adapten completament al cos de la persona, acollint-la i estimulant-la. La pressió profunda aplicada per les boles remarquen els límits corporals, proporcionant una sensació de calma i benestar inigualable.

Teràpia i tractament

Els terapeutes i altres professionals utilitzen Protac MyBaSe per a l'estimulació sensorial i per als tractaments del procés sensorial a nens, adults i persones grans. Protac MyBaSe també s'empra a les activitats motores, ja que exercita el sentit de

l'equilibri quan l'usuari es mou per sobre del matalàs. És, a més, fàcil de transportar i molt versàtil mercès a llurs dues cares, permetent tractaments molt més adients a les necessitats individuals.

Disseny

Protac MyBaSe es pot inflar en dos o tres minuts utilitzant la bomba d'aire inclosa. Les boles del matalàs estan distribuïdes en quatre compartiments, que junts formen una gran bossa de boles embolicades per una funda elàstica amb cremallera que es pot posar i treure sense dificultats, a més de poder-se rentar a màquina.

Les nanses laterals faciliten el transport i moure el MyBaSe. Quan no s'està utilitzant, pot col·locar-se verticalment contra la paret per reduir al màxim l'espai que ocupa.

Protac MyBaSe®

Esdevé un immillorable suport i embolcalla el cos

Reforça la consciència corporal

Calma i relaxa

Fomenta l'equilibri i la coordinació

Actua com una base de seguretat



Disseny
Danès



Protac A/S

Protac és un projecte innovador i socialment responsable, creat el 1994. La idea bàsica dels productes Protac prové de les teories sobre el processament sensorial, que es basen sobre el que sabem de la interacció entre les sensacions corporals i el comportament i la participació a les activitats de la vida diària. Els productes Protac contenen boles de plàstic que estimulen els sentits del tacte i de la propiocepció mitjançant el seu pes i la pressió profunda distribuïts uniformement, augmentant el coneixement corporal i calmant a l'usuari.

Investigació i documentació

Protac treballa contínuament en la investigació i la documentació dels resultats dels seus productes. En el 2010 vam liderar un projecte d'investigació a la University of Southern Denmark sobre com afecta la manta de boles en la qualitat del son dels nens amb TDAH. Les conclusions es van publicar al Nordic Journal of Psychiatry a l'abril del 2011.

Innovació i desenvolupament de productes

Els productes Protac són provats contínuament pels seus consumidors, ens basem en les seves opinions per desenvolupar els nostres productes juntament amb experts professionals de la Fisioteràpia i de la Teràpia Ocupacional.

Protac segueix sempre un procés d'innovació estructurat, que es basa en les últimes investigacions del processament sensorial.

Els productes Protac porten el segell CE i es distingeixen per la seva alta qualitat, disseny modern i per la nostra familiaritat amb els clients. Treballem amb dissenyadors professionals.

Protac realitza contínuament controls estrictes a tots els qui intervenen en la producció per garantir en tot moment l'alta qualitat de Protac i els estàndards ambientals.

Experiència i assessorament

Protac ofereix l'assessorament dels seus experts, tant de comercials professionals com de fisioterapeutes o de terapeutes ocupacionals, així com la formació contínua a través de cursos i conferències. Tot el personal administratiu de Protac també està al dia dels últims esdeveniments del projecte.

Protac Internacional

A través dels nostres distribuïdors, Protac exporta a un gran nombre de països com Noruega, Suècia, Alemanya, Àustria, Suïssa, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Espanya, àrea Centreamericana, Mèxic, Colòmbia, Xile i Austràlia.





PROTAC A/S

Distribuït per:
HANDYCAT SL
T. +34 977 609 003
info@handycat.com
www.handycat.com

